


DIO NAVI 웹사이트 주문서 작성 방법

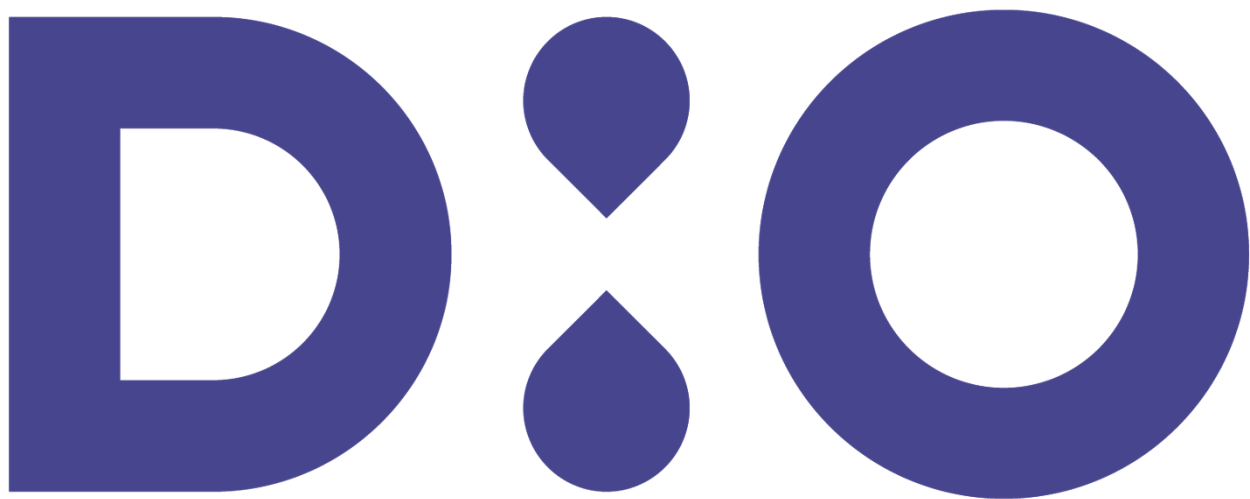

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

1. 웹사이트 디오유저 로그인

▶ 국내 DIO NAVI 메인화면

① 디오 유저(의료인)

- 회원 가입된 계정으로 로그인

* 디오나비 주문서 접수는 마이디오 회원 전환 후 가능

i 마이디오 회원 전환 후 디오 유저에서 로그인

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

로그아웃 (ERP팀님) | 마이페이지 원격 1 원격 2

D:O NAVI

주문하기 DIO NAVI DIO Ortho NAVI Cement-less System 세미나/교육 커뮤니티

1 주문하기

주문하기

DIO NAVI

DIO Ortho NAVI

산

/12(토)

등록방법: 홈페이지 및 담당 영업 접수

Full Arch DDA 신청하기

시간	강의 내용
16:00 ~ 16:30	Live surgery case presentation
16:30 ~ 18:30	DIOnavi guide surgery & 1st Provisional Bridge Setting
18:30 ~ 19:00	Q&A / Patient check

▶ 디오 유저 메인화면

① 주문하기 → DIO NAVI 선택

① 주문하기를 클릭하여 DIO NAVI, DIO OrthoNAVI 팝업 중 DIO NAVI 선택

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

01 치과/기공소정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

1

치과명/기공소(실) *

ERP팀

배송지 정보 *

배송지가 리스트에 없습니다.(추가 입력)

배송지명

전화번호

휴대폰번호

우편번호

주소 검색을 통해 주소를 선택해주세요.

주소검색

상세 주소를 입력해주세요.

배송메세지를 입력해주세요.

2

병원원장 및
디오나비 담당스텝
연락처/이메일 *

원장님

전화번호

이메일

실장님

전화번호

이메일

디오나비 담당스텝

전화번호

이메일

※ 담당자 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다. 정확한 정보를 입력해주세요.

3

영업담당자
연락처/이메일 *

영업담당자

영업담당 전화번호

영업담당 이메일

1. 치과/기공소정보

① 배송지 정보

* 최초 1회 기입 시 리스트 자동 입력

② 원장님 / 스텝 연락처, Email

* 주문서 진행 상황 SMS 수신 받으실 연락처 작성

③ 담당 영업사원 연락처 기입

① 원장님 및 담당 스텝의 연락처는 접수된 주문서의 진행 상황을 안내해 드리는 SMS 전송에 사용되므로, 정확한 정보 기입이 필요합니다. 담당 스텝이 변경되는 경우에는 주문 접수 시 정보를 반드시 수정해 주세요.

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

1

02 환자기본정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

환자 이름 *								
환자 연령대 *	☐ 10대	☐ 20대	☐ 30대	☐ 40대	☐ 50대	☐ 60대	☐ 70대	☐ 80대 이상
환자 성별 *	☐ 남자 ☐ 여자							
전신병력기록 *	☐ 해당 없음 ☐ 흡연 ☐ 골다공증 ☐ 골다공증(약 복용) ☐ 이갈이 ☐ 당뇨 ☐ 신장질환 ☐ 간염 ☐ 고혈압 ☐ 출혈성질환 ☐ 기타							

2. 환자기본정보

① 환자 이름

- 전송하신 스캔데이터의 환자명과 일치한지 확인
- 다른 환자명인 경우 진행 누락이 발생 될 수 있음.

② 기타 환자 정보 체크

① 작성된 환자명이 전송해 주신 스캔 데이터의 환자명과 다를 경우,작업 진행 시 누락될 수 있으므로 정확한 환자명 작성이 필요합니다. 주문 접수 완료 후 오입력이 확인된 경우, 디오나비 콜센터 또는 카카오톡 채널로 문의해 주세요.

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

03 주문정보

Guide 디자인을 위한 정보

1 패키지/일반 선택 *

일반

※ 패키지 잔액이 (-)인 경우 목록에 표시되지 않음 / 선택할 패키지 없을 경우 [일반] 선택하세요.

P101230927-0009 (1억1천 PK)

P101220331-0028 (FullArch 1억2천PK)

P101230330-0009 (23년 2억2천 PK)

P101230330-0012 (23년 1억 PK)

P101230927-0009 (1억1천 PK)

P101241203-0002 (대체)보형용IMP 2666PK)

P101250425-0002 (대체)임플란트 복합패키지)

2 ITEM *

☐ Trios Scan
 ☐ 석고모델
 ☐ Trios 외 구강스캐너
 ☐ Splint ?

※폴라치 진행시에도 스플린트 제작은 일반나비 주문진행이 필요합니다.
※스플린트(병원에서)재발송 이후 사이트 지정된 수술예정일에서 +3일이 더 필요합니다.

3 Special KIT 종류 *

☒ 기존 - Short anchor screw & Short Drill
 ☐ 개선 - Long anchor screw & Long Drill

※ 가이드의 정밀도를 위하여 Special KIT의 구성품 중, Long Anchor Screw 와 Long Drill 로 개선 되어졌습니다.

4 Planning 주체 *

☐ DIO에서 Planning
 ☐ Clinic자체 Planning

5 제작서비스 *

☒ 일반
 ☐ 프리미엄

프리미엄 서비스?

긴급 제작 지원

추가비용 15,000원

6 Master Kit 종류 *

☒ Master Kit (기존)
 ☐ Master S Kit (신형)

자세히보기

7 가공 주체 *

☒ DIO
 ☐ Clinic(PROBO)
 ☐ PROBO Z

파일 업로드 시 주의사항

1. CT 파일은 압축하여 ZIP 파일로 업로드 바랍니다.
 2. 네모 박스 안에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 추가 또는 삭제가 가능합니다.
 3. 오류발생시 1599-3875 내선번호 2번, 디오나비팀 플러스친구 (오)로 문의주세요.

CT 구강스캐너(STL) 파일 첨부 *

이름

크기

선택된 파일이 없습니다. 파일을 추가 하십시오.

파일찾기

ⓘ Master S kit : 쉽고 직관적인 KIT 레이아웃, 간소화 된 시술 프로토콜,
 개선되어 추가 된 drill 구성품(Deep bone Flattening drill, Initial positioning drill 등)

3. 주문정보

① 패키지/일반 선택

- 계약한 패키지를 선택

* DIONAVI / DIONAVI.fullarch 구분 필요

② ITEM

- 제작시 사용 될 기초데이터 선택

* Splint : Guide가 아닌 Splint 제작시 선택

③ Special kit 종류

- 보유 중인 Special kit에 따라 선택

- 기존형(15mm drill) / 개선형(19mm drill)

④ Planning 주체

- DIO에서 Planning 선택

⑤ 제작 서비스

- 일반: 납품기간 3박 4일

- 프리미엄: 우선순위로 Planning진행

⑥ Master Kit 종류

- Master kit : 기존 제품

- Master S kit : 새로 출시된 제품.

⑦ 가공 주체

- DIO : DIO에서 생산하여 제품 배송

- Clinic / ProboZ : 사이트에 업로드 된 Guide stl 파일을
사용하여 치과 자체적으로 생산

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

1
파일 업로드 시
주의사항

1. CT 파일은 압축하여 ZIP 파일로 업로드 바랍니다.
2. 네모 박스 안에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 추가 또는 삭제가 가능합니다.
3. 오류발생시 1599-3875 내선번호 2번, 디오나비팀 플러스친구 (오)로 문의주세요.

2
CT
구강스캐너(STL)
파일 첨부*

이름	크기
CT 파일(Zip으로 압축하여 첨부.zip)	188.94MB

1 개체, 188.94MB 첨부됨 | 최대 5 개, 5GB

※ Trios 외 구강스캐너(STL) 파일 첨부시 Bite 정렬은 필수입니다.

drag and drop upload

이름
 CT 파일(Zip으로 압축하여 첨부
 파노라마사진

3
Panorama/
Planning
파일 첨부*

이름	크기
파노라마사진.jpg	2.02MB

1 개체, 2.02MB 첨부됨 | 최대 5 개, 5GB

4
Guide 정보*

☐ Guide ☐ Anchor ☐ Full Arch Guide (Bone reduction Guide ☐)
* Full Arch Guide 주문시, 일반 가이드와 함께 주문이 되지 않아 일반 가이드 주문을 따로 등록 부탁드립니다.

시술위치*

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. 주문정보_파일첨부

- ① 파일 업로드 시 주의사항
- ② CT, 구강스캐너(STL) 파일 첨부
 - CT는 DCM으로 추출하여 압축 파일로 첨부
 - ITEM 선택시 "Trios 외 구강스캐너"인 경우 스캔데이터 파일도 함께 첨부
- ③ Ponorama / Planning file 첨부
 - 파노라마.jpg 파일 첨부(필수 X)
 - Clinin planning의 경우 3oxz 첨부
- ④ Guide 정보
 - Guide 선택 후 Anchor pin 필요 시 중복 선택

- Full Arch Guide 선택 시, 주문서가 Full Arch 전용 양식으로 전환됩니다. 패키지 항목도 반드시 다시 선택해 주세요.
 또한, 동일 환자의 DIONAVI 일반 가이드는 Full Arch 가이드와 함께 접수하실 수 없습니다.
 반드시 일반 가이드는 별도 주문으로 분리하여 접수해 주시기 바랍니다.

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

1

Guide 정보 *

☒ Guide
 ☐ Anchor
 ☐ Full Arch Guide (Bone reduction Guide)

* Full Arch Guide 주문시, 일반 가이드와 함께 주문이 되지 않아 일반 가이드 주문을 따로 등록 부탁드립니다.

2

시술위치 *

약한 골질에서의 초기 고정력 증가

UFIII Implant

자세히보기

Early Loading

VUV Implant

자세히보기

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34				
☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

3

시술 Case *

☐ Sinus
 ☐ 발치즉시
 ☐ GBR
 ☐ 무치악
 ☐ 일반
 ☐ 해당없음

4

ECO CAD

☐ 사용
 ☐ 라이브러리 사용

5

수술 예정일 *

☒ 오전
 ☐ 오후

수술 의사 이름 *

요청사항

2025년 6월

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

3. 주문정보_시술부위선택

- ① 시술 위치
 - Implnat 시술 부위 선택
- ② 시술 Case
 - Case 계획 선택 (중복 선택 가능)
- ③ 수술 예정일
 - 최소 납품기간 기준으로 일정 선택 활성화
 - 수술일 미정일 경우, 요청사항란에 별도 기입
 - OP 급한 경우, 프리미엄 서비스 체크
- ④ 수술 의사 성함 기입
- ⑤ 요청사항

① 요청사항란에는 주문서에 표시되지 않은 디자인 참고 사항을 기입해 주세요.
(예: 선호하는 Implant Size, 최종 보철 계획, 시술부위 외 발치 예정 치식 등)

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

1 보철물은 디오에서 제작하지 않습니다. 스캔 파일은 거래하시는 기공소에 전달되며, 기공소와 협의하시기 바랍니다.

Abutment 정보* ☒ Customized Abutment ☐ Digital Abutment ☐ UV+ Abutment ☐ Abutment Jig ☐ 해당없음

빠르고 정확한 Cementless 보철 UV+ Abutment
자세히보기

Temporary Crown* ☒ Temporary Crown 보철물은 디오에서 제작하지 않습니다. 스캔 파일은 거래하시는 기공소에 전달되며, 기공소와 협의하시기 바랍니다.

보철물 제작 주체* ☒ 자체 기공소 ☐ 기공소명 입력 ☐ 기공소 메일 주소 입력

3 주문 상세내역 입력(Abutment 제작을 위한 정보)

* 표시는 필수 입력항목입니다.

No	Fixture No. *	Connection Type *	MargIn Type *	Draft Angle	Shoulder Width	Gum	Cuff	최종 보철물*
☒ 15	UF(II) HEX	HEX	Sub 1.5mr	Angle	Width	미선택	미선택	Zirconia
☒ 16	UF(II) HEX	HEX	Sub 1.5mr	Angle	Width	미선택	미선택	Zirconia
☒ 17	UF(II) HEX	HEX	Sub 1.5mr	Angle	Width	미선택	미선택	Zirconia
☒ 46	UF(II) HEX	HEX	Sub 1.5mr	Angle	Width	미선택	미선택	Zirconia

i 디오는 보철물을 직접 제작하지 않으며, 연계 기공소가 없는 경우 자동으로 디오 협력 기공소로 파일이 전달됩니다.
따라서 제작 오류를 방지하기 위해 주문서 상세 내역을 정확하게 입력해 주세요.

3. 주문정보_보철물정보

① Abutment 정보/Temporary Crown

- Abutment 종류, Temporary crown 선택

② 보철물 제작 주체

- 기공소 정보 입력

(보철 제작 파일 수신을 위한 정보입니다)

③ Abutment 주문 상세내역

- 기공소 전달용 Abutment 정보 입력

DIO NAVI 웹사이트 주문서 접수

2. DIO NAVI 주문하기

1

Single/Bridge 선택(Temporary Crown)

* 표시는 필수 입력항목입니다.

치식에 싱글 또는 브릿지로 제작할지 선택하여 주세요. *

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

브릿지 설정

싱글 설정

↻

1번 15 16 17 2번 46 47

2 기타/요청사항

3 주문서 임시저장

주문서 접수

3. 주문정보_보철물정보

① 보철물 선택

- 치식 선택 후 Single / Bridge 중 선택

② 기타/요청사항

- 보철 제작 관련 요청사항 상세히 입력

③ 임시 저장 / 주문서 접수

- 임시 저장 후 추후 주문 접수 가능

(주문서 누락 될 수 있습니다)

- 즉시 주문서 접수 가능

i 디오는 보철물을 직접 제작하지 않으며, 연계 가공소가 없는 경우 자동으로 디오 협력 가공소로 파일이 전달됩니다. 따라서 제작 오류를 방지하기 위해 주문서 상세 내역을 정확하게 입력해 주세요.

감사합니다.

