


UFIII Implant

초기 고정력을 안정적으로!



Soft Bone에 특화된 디자인으로 초기 고정력을 더욱 안정적으로!

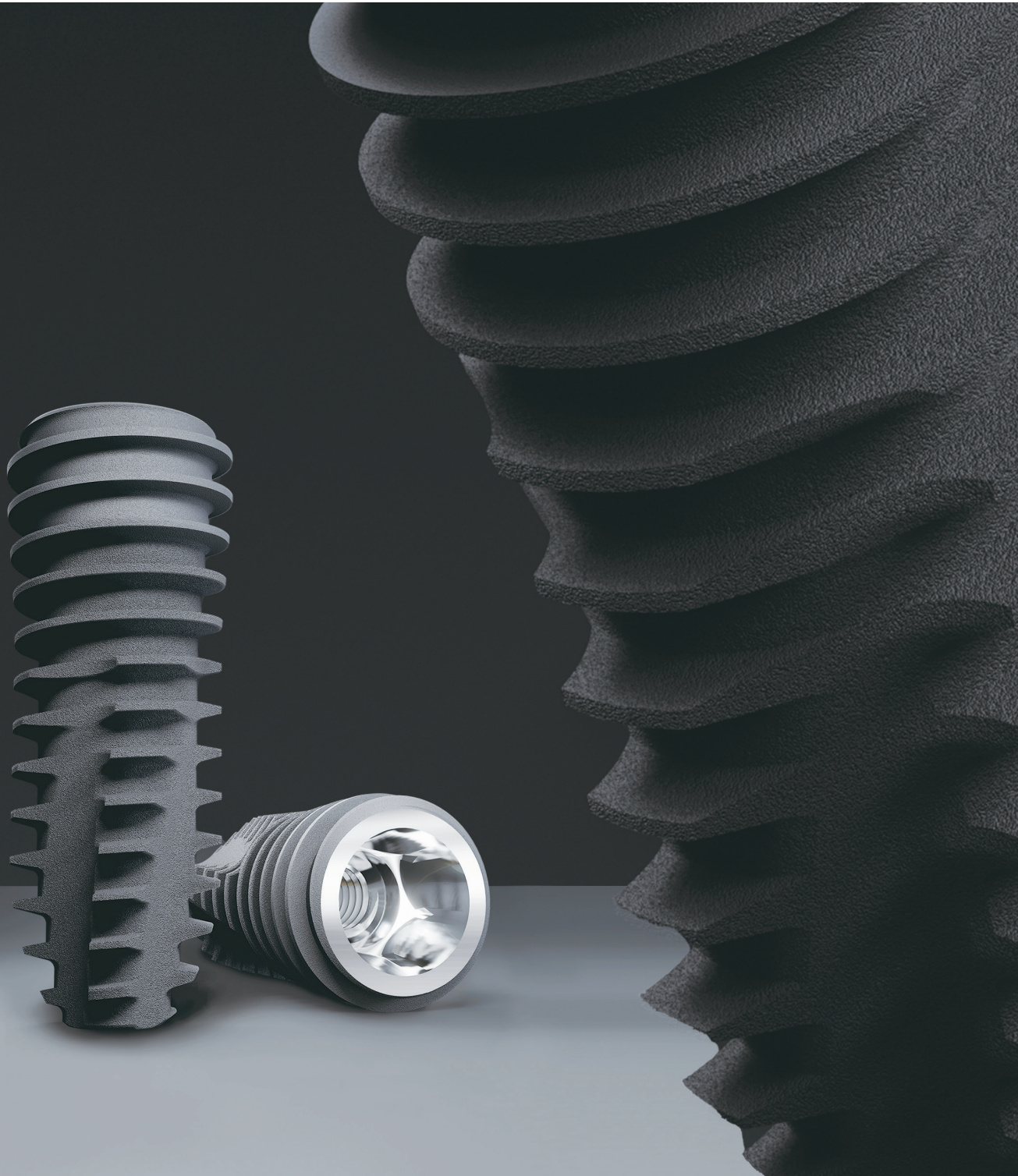

Soft Bone에 강력한 디자인

전체적인 Tapered 형상 및 더 커진 Cutting Edge 디자인에 의해
식립감 및 Self-tapping 기능 향상



다양한 적응증 해결

상악동, 발치 즉시 식립, 무치악 등



Drill Protocol 단축


Soft Bone에서 직경에 따라 1~4단계 단축,
Under Drilling시에도 쉽게 Self-tapping가능




UFIII Implant 표면처리

Hybrid Type SLA Implant(HSA)


상부는 Peri-implantitis 예방을 위해 미세한 거칠기를,
Body 및 Apex 부위는 골유착에 가장 적합한 표면 거칠기를 적용합니다.

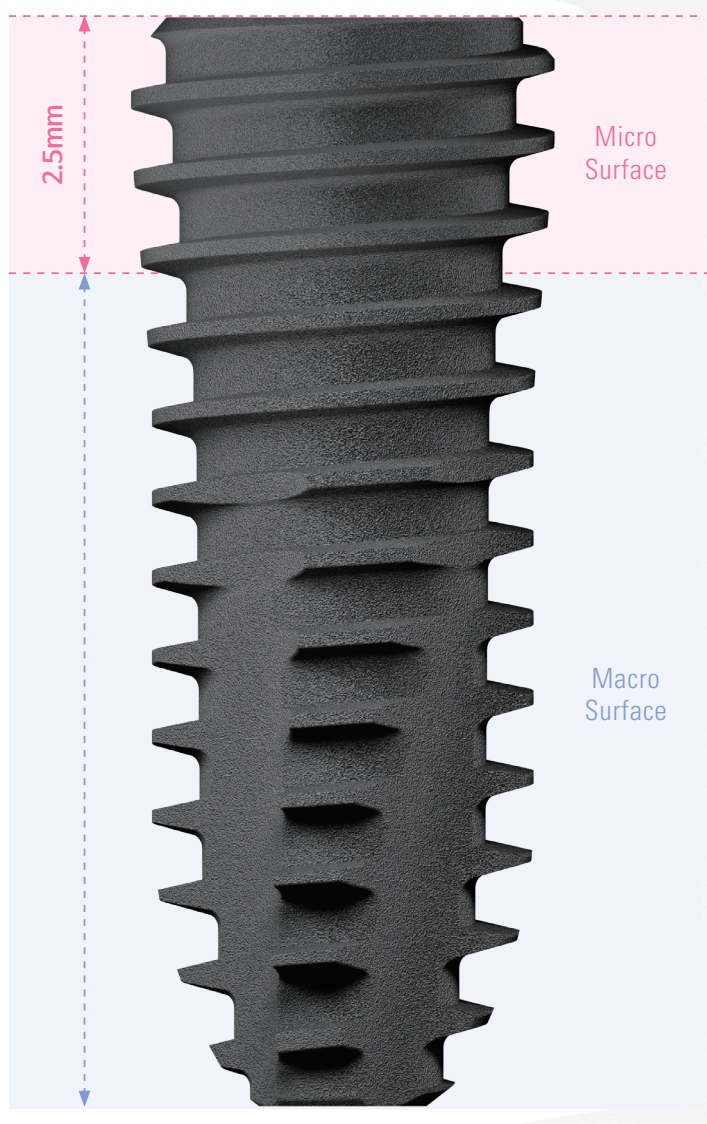


· Upper Body

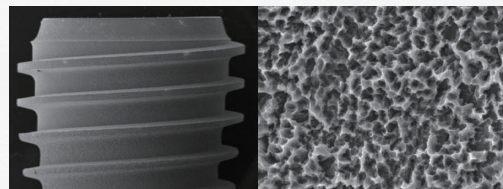

· Lower Body & Apex

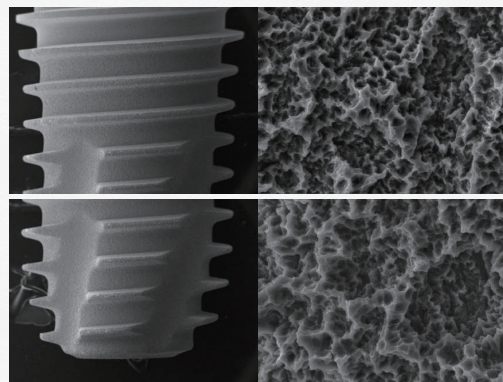

Fixture 디자인 특징

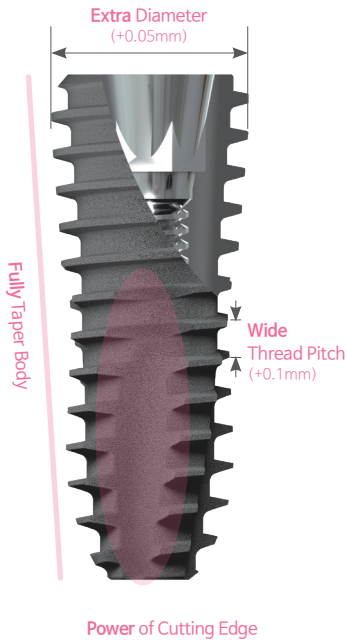

01 Tapered Body & Powerful Cutting Edge

- 전체적인 Tapered Type으로 식립감이 우수하며 길고 날카로운 Edge 형상으로 쉽게 Self-tapping 가능

02 Wide Thread Pitch

- BIC 효과를 극대화할 수 있는 Thread Pitch 간격 및 깊이 Design 적용

03 Extra Diameter


- Soft Bone과 상악동 Case에서도 안정적인 고정력 획득

04 Open Thread


- Fixture 식립 저항을 줄여 식립 깊이 조절 가능

UFIII Implant Clinical Case


01. 상악 Soft Bone Case

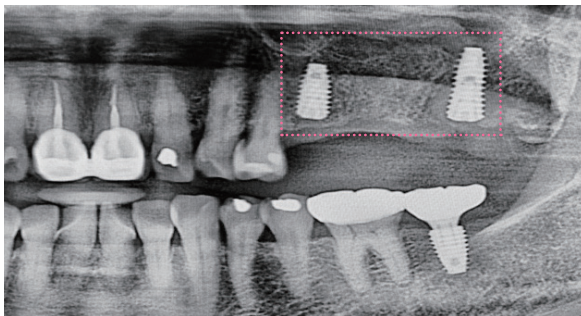


02. 상악 Soft Bone Case

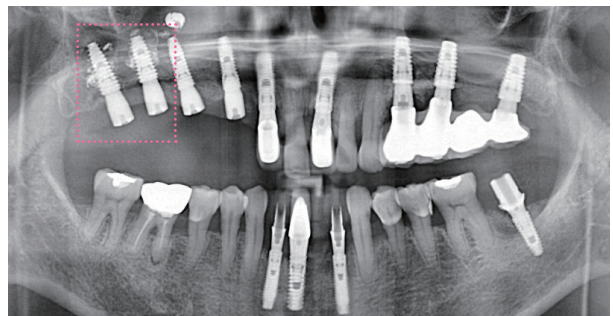

03. 하악 발치 즉시 식립 Case

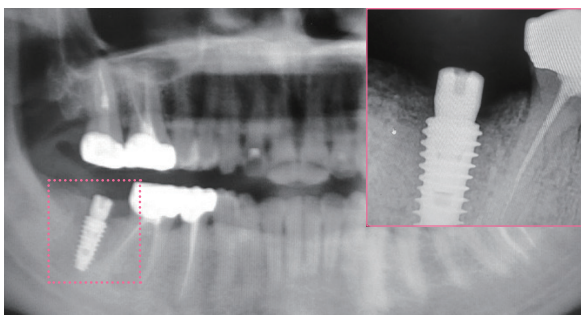


04. 상악 무치악 Case

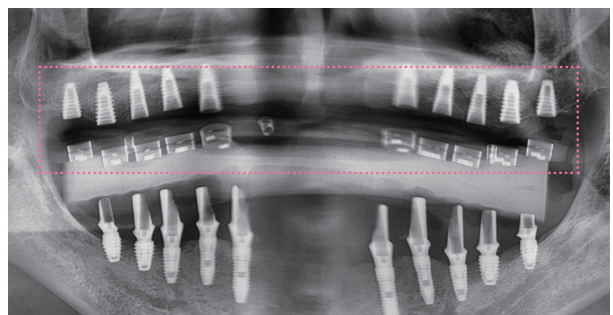

Protocol 비교

Flap Surgery

3단계 단축

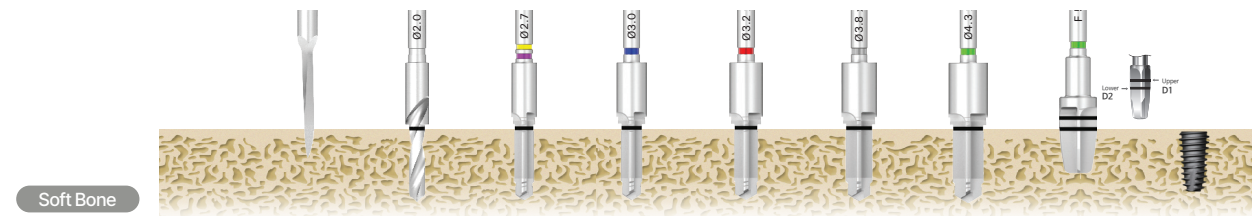


Bone Density	Fixture	Drill								Ø5.0 x 10mm
		Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile	
D4	UFII	●	●	●	●	●	●			
	UFIII	●	●	●						

3단계 단축

Flapless Surgery

4단계 단축

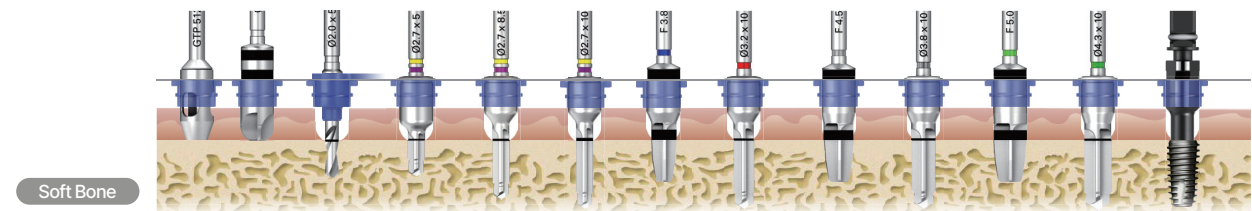


Bone Density	Fixture	Drill										Ø5.0 x 10mm
		Ø2.0 x 5mm	Ø2.7 x 5mm	Ø2.7 x 8.5mm	Ø2.7 x 10mm	F3.8 x Profile	Ø3.2 x 10mm	F4.5 x Profile	Ø3.8 x 10mm	F5.0 x Profile	Ø4.3 x 10mm	
D4	UFII	●	●	●	●	●	●	●	●			
	UFIII	●	●	●	●							

4단계 단축

주문코드

UFIII Narrow Fixture

- HSA / Packing Unit : Fixture | Order code : UFIIN 0000SF (ex : UFIIN 3008SF)
Fixture + Cover Screw | Order code : UFIIN 0000S (ex : UFIIN 3008S)
- UV Active / Packing Unit : Fixture | Order code : UFIIN 0000UV3 (ex : UFIIN 3008UV3)

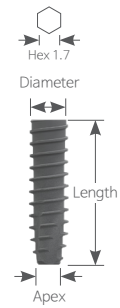

N D Ø3.0 Hex 1.7 Apex Ø1.6

Unit mm | Scale 1 : 1.2


Length	8.5	10	11.5	13	15
					
HSA	UFIIN 3008SF	UFIIN 3010SF	UFIIN 3011SF	UFIIN 3013SF	UFIIN 3015SF
UV Active	UFIIN 3008UV3	UFIIN 3010UV3	UFIIN 3011UV3	UFIIN 3013UV3	-

N D Ø3.3 Hex 1.7 Apex Ø1.7

Length	8.5	10	11.5	13	15
					
HSA	UFIIN 3308SF	UFIIN 3310SF	UFIIN 3311SF	UFIIN 3313SF	UFIIN 3315SF
UV Active	UFIIN 3308UV3	UFIIN 3310UV3	UFIIN 3311UV3	UFIIN 3313UV3	-

UFIII Regular Fixture

- * HSA / Packing Unit : Fixture | Order code : UFIII 0000SF (ex : UFIII 3808SF)
Fixture + Cover Screw | Order code : UFIII 0000S (ex : UFIII 3808S)
- * UV Active / Packing Unit : Fixture | Order code : UFIII 0000UV3 (ex : UFIII 3808UV3)

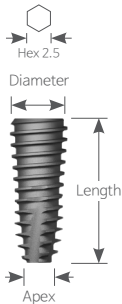

R D Ø3.8 Hex 2.5 Apex Ø1.4

Unit mm | Scale 1 : 1.2

Length	7	8.5	10	11.5	13
HSA	-	UFIII 3808SF	UFIII 3810SF	UFIII 3811SF	UFIII 3813SF
UV Active	-	UFIII 3808UV3	UFIII 3810UV3	UFIII 3811UV3	UFIII 3813UV3

R D Ø4.0 Hex 2.5 Apex Ø1.6

Length	7	8.5	10	11.5	13
HSA	UFIII 4007SF	UFIII 4008SF	UFIII 4010SF	UFIII 4011SF	UFIII 4013SF
UV Active	UFIII 4007UV3	UFIII 4008UV3	UFIII 4010UV3	UFIII 4011UV3	UFIII 4013UV3

R D Ø4.5 Hex 2.5 Apex Ø1.6

Length	7	8.5	10	11.5	13
HSA	UFIII 4507SF	UFIII 4508SF	UFIII 4510SF	UFIII 4511SF	UFIII 4513SF
UV Active	UFIII 4507UV3	UFIII 4508UV3	UFIII 4510UV3	UFIII 4511UV3	UFIII 4513UV3

R D Ø5.0 Hex 2.5 Apex Ø2.0

Length	7	8.5	10	11.5	13
HSA	UFIII 5007SF	UFIII 5008SF	UFIII 5010SF	UFIII 5011SF	UFIII 5013SF
UV Active	UFIII 5007UV3	UFIII 5008UV3	UFIII 5010UV3	UFIII 5011UV3	UFIII 5013UV3



(주)디오 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 66 | 대표번호 051-745-7777 | www.dioimplant.com

강남·강서지점	02-2268-2850	경기지점	031-244-2885	광주지점	062-384-2822	울산지점	052-256-2177
강북지점	02-2274-2850	강원지점	033-765-2809	전주지점	063-244-9654	대구지점	053-321-2806
인천지점	032-515-2878	대전지점	042-255-2804	부산지점	051-745-7810	경남·제주지점	055-267-5229