


DIO Cementless Prosthetic System

UV⁺ Abutment

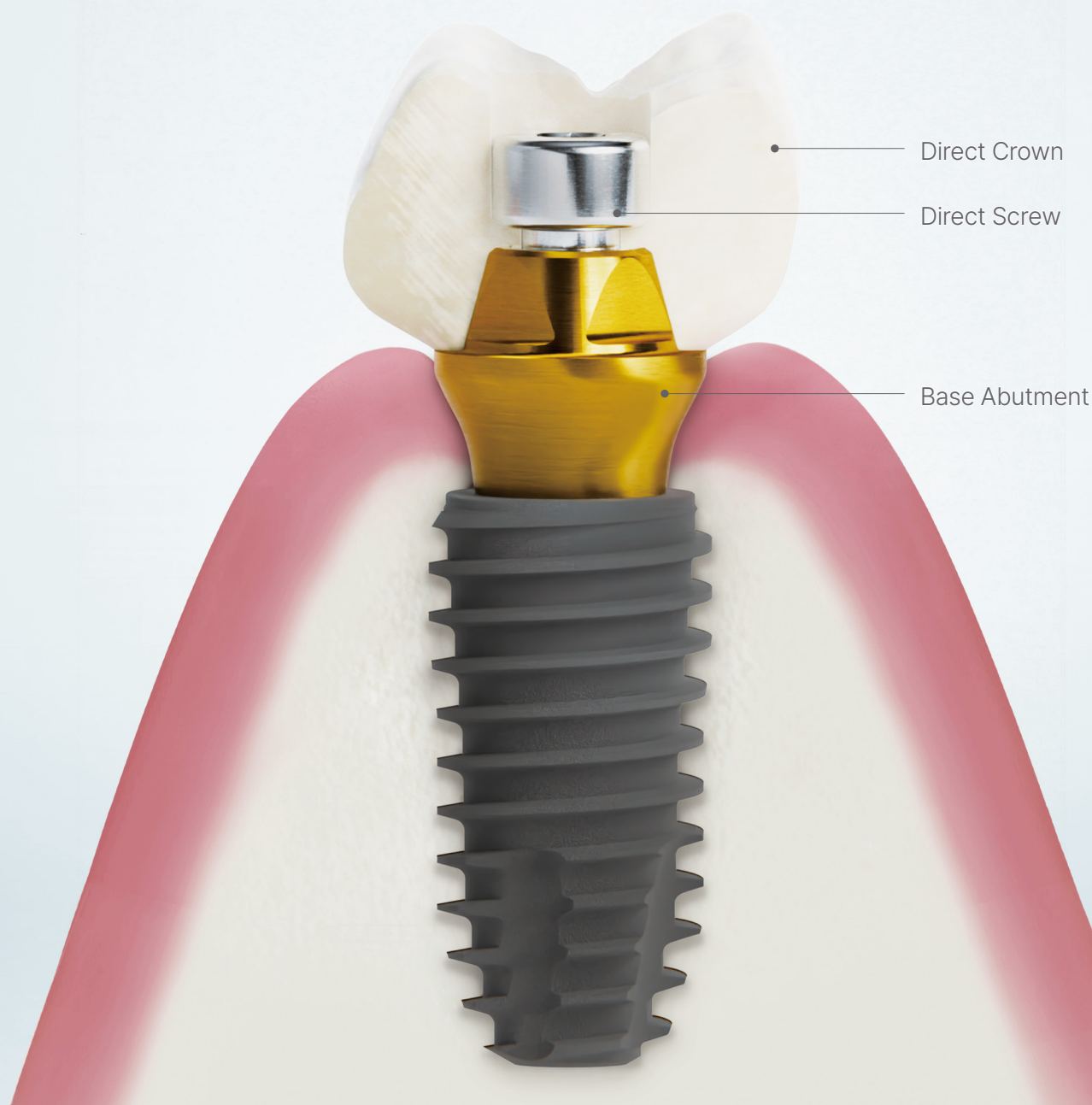

UV+ Abutment의 특징점

1 Cementless 보철의 단점 극복

No Link, No Collet, No Flat Bur!


라이브러리만 있으면 누구나 쉽게 Cementless 보철 제작 가능

2 낮은 VD에서도 사용 가능

보철을 최소 높이로 제작할 수 있어
수직고경이 낮은 경우에도 보철 제작 가능



UV+ Abutment

VD 5mm까지 Screw Retained 보철 가능

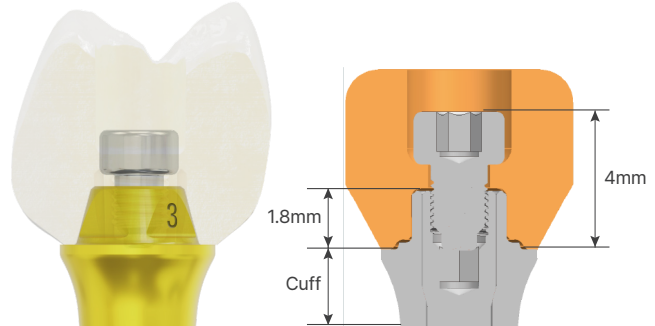

3 자유로운 각도 보상

Screw Hole 각도를 최대 15°로 조정 가능해 전치부에서 설측 방향으로
체결하거나 구치부 비교합면 부위로 위치 조정 시 사용 가능

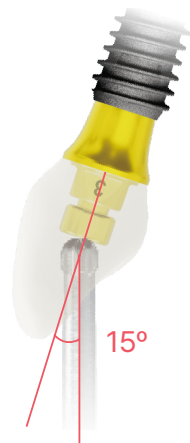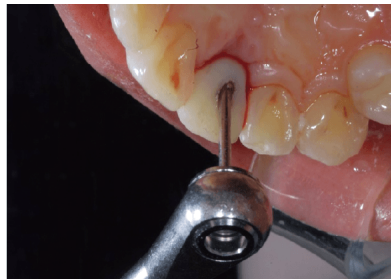


*목포예닮치과병원 임상 적용 Case

Option

VUV 기술 적용

Abutment 체결 전 VUV를 조사 하여
더 견고한 Emergency Profile 형성 가능

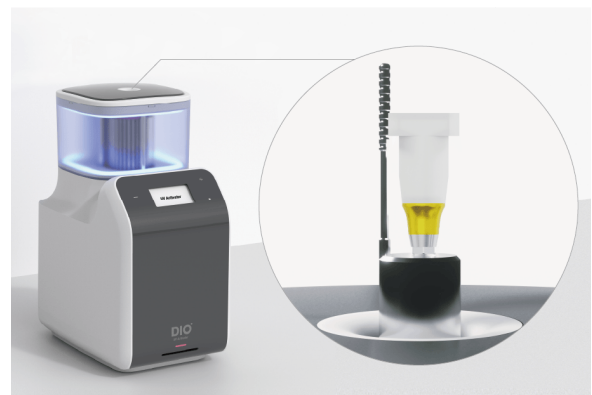


UV+ Abutment Components

UV+ Base Abutment

보험 Code | L7553061

Tightening Torque **Narrow** 20Ncm **Regular** 35Ncm

Packing Unit **Hex** Base Abutment + Screw + Holder **Non-Hex** Base Abutment

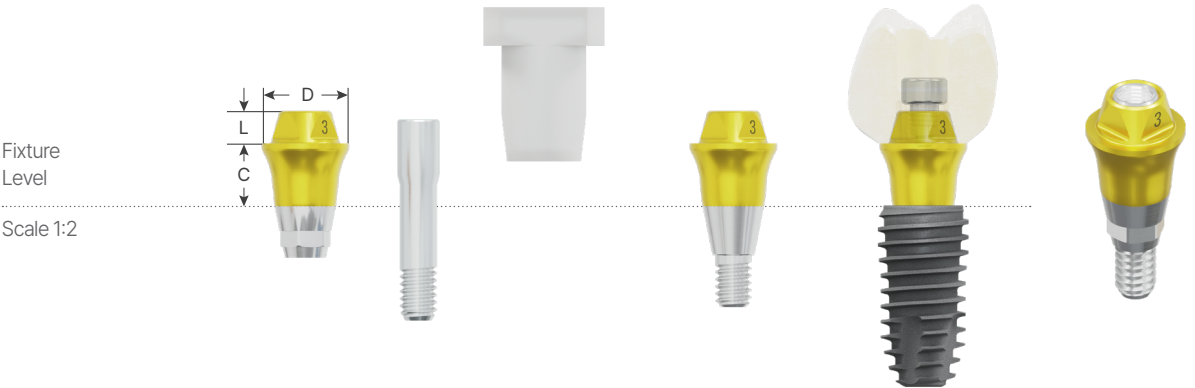

Fixture Size		Narrow		Regular			
Diameter		Ø4.2		Ø4.8		Ø5.5	
Type		Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Cuff	1.5	-	-	DSRBA 4801H	DSRBA 4801N	DSRBA 5501H	DSRBA 5501N
	2.5	DSRNBA 4202H	DSRNBA 4202N	DSRBA 4802H	DSRBA 4802N	DSRBA 5502H	DSRBA 5502N
	3.5	DSRNBA 4203H	DSRNBA 4203N	DSRBA 4803H	DSRBA 4803N	DSRBA 5503H	DSRBA 5503N
	4.5	DSRNBA 4204H	DSRNBA 4204N	DSRBA 4804H	DSRBA 4804N	DSRBA 5504H	DSRBA 5504N
	5.5	DSRNBA 4205H	DSRNBA 4205N	DSRBA 4805H	DSRBA 4805N	DSRBA 5505H	DSRBA 5505N
	6.5	DSRNBA 4206H	DSRNBA 4206N	DSRBA 4806H	DSRBA 4806N	DSRBA 5506H	DSRBA 5506N
	7.5	DSRNBA 4207H	DSRNBA 4207N	DSRBA 4807H	DSRBA 4807N	DSRBA 5507H	DSRBA 5507N

UV+ Base Abutment Cap

Tightening Torque **공통** 20Ncm

Packing Unit **공통** Base Abutment Cap + Screw (DSRBACS 1804H)



Height 5

Scale 1:2

Fixture Size		Narrow		Regular			
Diameter		Ø4.2		Ø4.8		Ø5.5	
Type		Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Code		DSRNBAC 4205H	DSRNBAC 4205N	DSRBAC 4805H	DSRBAC 4805N	DSRBAC 5505H	DSRBAC 5505N

UV+ Healing Cap

Tightening Torque 5~8Ncm




Height 4.5

Fixture Size	Narrow	Regular	
Diameter	Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Code	DSRNHC 4204	DSRHC 4804	DSRHC 5504

UV+ H-Scanbody

Tightening Torque 5~8Ncm

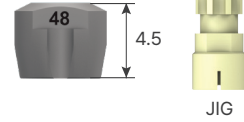


Height 4.5

Fixture Size	Narrow	Regular	
Diameter	Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Code	DSRNHSB 4204	DSRHBSB 4804	DSRHBSB 5504
Jig *별매품	JIG 501	JIG 1551	JIG 602

UV+ Scan Adapter

Tightening Torque 5~8Ncm

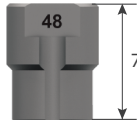

Height 7

Fixture Size	Narrow	Regular	
Diameter	Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Code	DSRNSA 4207	DSRSA 4807	DSRSA 5507

UV+ Digital Analog



Fixture Size	Narrow	Regular
Diameter	Ø4.2	Ø4.8
Code	DSRNDA 42	DSRDA 48

UV+ Direct Screw

Tightening Torque **Narrow** 20Ncm **Regular** 25Ncm

* Uses Hex Driver(HD 1200A), Torx Driver(ATD 1700)

Fixture Size	Narrow & Regular	
Diameter	1.2 Hex	Torx
Code	DSRDS 1804H	DSRDS 1804T



Hex



Torx



각도 보상이
불필요한 Case



각도 보상이
필요한 Case

Abutment UV Jig

* Abutment에 VUV 조사 시 사용

Code	AUJ 03
------	--------

